



Elektromos robogó GEORGE Comfort



A biztonságos használat érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Ez a használati útmutató fontos biztonsági információkat és tippeket tartalmaz, kérjük, figyelmesen olvassa el. Ne használja az elektromos rollert, mielőtt elolvashá. Őrizze meg megfelelően a használati utasítást, hogy később is tájékozódhasson.

Kedves felhasználó!

Köszönjük, hogy megvásárolta az AERIUM elektromos robogót. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót. Megtanulja, hogyan kell megfelelően használni és karbantartani elektromos robogóját, valamint hogyan maximalizálja biztonságát vezetés közben.

Alapvető biztonsági óvintézkedések:

1. NE használja a robogót, amíg nem ismeri a használati útmutatót és a robogó egyedi funkcióit.
2. NE add kölcsön a robogót olyan személyeknek, akik nem tudják irányítani, tinédzsereknek, terhes nőknek vagy fogyatékkal élőknek.

A 18 év alatti gyermekeket a következő védőfelszerelésekkel kell ellátni: sisak (kötelező), könyökvédő, térdvédő.

A robogót 14 éven aluli gyermekek felügyelet nélkül nem használhatják.

3. Mielőtt elindulna az elektromos rollerrel, alaposan ellenőrizze, hogy a fékrendszere megfelelően működik-e. és hogy minden csavar megfelelően meg van húzva.
 4. Töltés közben tartsa a töltőt jól szellőző és termikusan megfelelő környezetben, ne töltsen az elektromos rollert magas hőmérsékleten. Töltés közben mindig ügyeljen az akkumulátorra.
 5. A gumibroncs vagy a felhasználó által állítható alkatrész cseréjekor győződjön meg arról, hogy a csavarok megfelelően meg vannak húzva. Bármely meglazult kerékcavar balesethez vezethet.
 6. NE szerelje szét vagy módosítsa az elektromos roller egyetlen alkatrészét sem. Ne módosítsa a robogó vázát, és ne zavarja a kábeleket. Ha az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető, mindig forduljon a legközelebbi e-robogó szervizhez.
 7. Javasoljuk védőfelszerelés, például sisak, térd-, könyök- és csuklóvédő viselését. Ez a felszerelés megvédi Önt leesés esetén.
 8. Kapcsolja ki az elektromos robogót, és hagyja abba a vezetésk, ha bármilyen rendellenességet észlel. Mindig konzultáljon a szervizzel a hibákkal kapcsolatban – ne vezessen az elektromos rollerrel, amíg meg nem oldják.
 9. Az első utazás előtt győződjön meg arról, hogy hol ülhet robogóval, ismerkedjen meg a hatályos törvényi előírásokkal és tartsa be azokat. Sem a gyártó, sem a szállító nem vállal jogi felelősséget a robogó meghatározott jogi kereteken kívüli használatáért.
- Az elektromos roller használatáért mindig a felhasználót terheli minden felelősség.
10. Ha az e-robogó felfújható gumikkal van felszerelve, indulás előtt mindig ellenőrizze a nyomásukat. A megfelelő nyomást általában közvetlenül a gumibroncon tüntetik fel.
- A nem megfelelő nyomás az e-robogó károsodásához, balesetekhez és leeséshez vezethet. Mindig ügyeljen arra, hogy a gumibroncs szelepe úgy legyen elhelyezve, hogy ne zavarja a működést. Az elektromos robogók általában hajlított szeleppel vannak felszerelve, amely a megfelelő helyzetben mindig a kerék felé hajlik. Minden más elhelyezés a gumibroncs vagy az e-robogó károsodását okozhatja.

Biztonsági utasítások vezetés előtt

Utazás előtti ellenőrzés. Minden utazás előtt ellenőrizze az e-robogót. Ne használja, ha valamelyik alkatrész meglazult vagy sérült, különösen a fékrendszer. Gondosan ellenőrizze az összes alkatrészt minden utazás előtt. Győződjön meg arról, hogy minden csavar jól meg van húzva. Győződjön meg arról, hogy egyik alkatrész sem deformálódott vagy sérült veszélyesen. Ha a robogó egy korábbi utazás során megsérült, vagy működés közben bármilyen rendellenességet észlel, mindig kerülje a további használatát, és ellenőriztesse a legközelebbi szervizben.

Utasítás

- Ne engedje, hogy más személy használja az elektromos robogót, hacsak figyelmesen el nem olvasta a használati útmutatót, vagy ha figyelmesen és alaposan kioktatta ezt a személyt a robogó minden kezelési pontjáról.

- Ne közlekedjen az elektromos rollerrel veszélyes környezetben. Például ezek olyan helyek, ahol tűz- vagy robbanásveszély állhat fenn gyúlékony gázok, gőzök, folyadékok, por vagy rostok miatt. Kerülje a csúszós felületeket, laza anyagokat, meredek lejtőket és akadályokat. HaHa nem tudja elkerülni a csúszós felületet, laza anyagot, meredek lejtőt vagy akadályt, akkor a robogót úgy kell vezetnie, hogy áthaladjon ezeken a felületeken. Legyen különösen óvatos, ha szűk helyen vagy akadályok közelében vezet.
- Legyen fokozottan óvatos a lejtőkön. Legyen fokozott elővigyázatos, amikor felmászik, ereszkedik vagy átkel a lejtőkön. Ne próbálja meg áthajtani rajtuk laza anyagú lejtőn vagy csúszós felületen. Ehelyett gyere le.
- Viseljen sisakot, térd- és könyökvédőt. Amikor elektromos robogóval közlekedik, viseljen megfelelően illeszkedő sisakot és állszíjjal. Viseljen jóváhagyott kerékpáros vagy gördeszkás sisakot, amely védelmet nyújt a fej hátsó részének. A vezetési körülményektől és vezetési tapasztalataitól függően fontolja meg további védőfelszerelések, például kesztyűk, szemvédők, csukló- és térdvédők használatát. Viseljen olyan cipőt, amely védi a lábát, és megfelelő támasztást és kényelmet biztosít.
- Utasítsa az új vezetőket, hogy ismerkedjenek meg az elektromos roller alapvető kezelőszerveivel.
- Minden új illesztőprogramnak kezdő módot kell használnia. Az új vezetők biztonságáért az e-robogó tulajdonosa a felelős.
- Vigyázz a kanyarokra! Mindig lassan és óvatosan forgassa. A gyors kanyarodás az irányítás elvesztéséhez és eleséshez vezethet. A nagy sebességű esések súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethetnek.
- Ne kockáztasson. Ha olyan lejtővel, egyenetlen terepen vagy más terepjellemzővel találkozik, amelyben nincs tapasztalata, vagy amely aggályokat vet fel a biztonságával kapcsolatban, ne kockáztassa, hogy fellovagoljon. Ehelyett szálljon le az e-robogóról, és vezesse azt.
- Ne viseljen bő ruházatot, amely beakadhat a gumibroncsokba és megakadályozhatja a megfelelő kormányzást.
- Nincs utastárs. Az elektromos robogó egy vezető számára készült. Ne lovagoljon egynél több emberből álló csoportokban. Vezetés közben ne hordjon gyermeket a karjában vagy gyermekhordozóban.
- Terhes anyák ne üljenek robogóval.
- Ne lépje túl a használati útmutatóban megadott maximális súlyhatárt (a vezető és az összes rakomány). Ellenkező esetben nagy a kockázata annak, hogy leesik, megsérül, és megsérül a vezető.
- Soha ne hajtson fel lépcsőn vagy forgójajton keresztül.
- Ne szálljon le a mozgó elektromos rollerről. Leszerelés előtt mindig álljon meg.
- Sötétben vezessen fokozott óvatossággal. Ne vezessen elektromos robogóval rossz látási viszonyok között világítás nélkül. Mindig ügyeljen arra, hogy látható legyen a többi közlekedő számára. Javasoljuk, hogy használjon fényvisszaverő elemeket a ruházaton, vagy további lámpákat a sisakon, hátizsákon stb.
- A biztonságos közlekedéshez látnia kell, hogy mi áll Ön előtt, és láthatónak kell lennie mások számára.
- Legyen éber – mint minden közlekedési eszköz esetében. Ne kíséreljen meg vezetni, ha beteg, vagy ha nem tudja maradéktalanul betartani a használati útmutató utasításait és figyelmeztetéseit. Soha ne vezessen alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
- Kerülje a zavaró tényezőket. Ne használjon mobiltelefont, ne viseljen fejhallgatót, és ne végezzen más olyan tevékenységet, amely elvonhatja a figyelmét, vagy zavarhatja a környezet megfigyelését vezetés közben.
- Készülj fel a megállásra. Legyen különösen óvatos, amikor kereszteződésekhez, felhajtókhoz, kanyarokhoz, bejáratokhoz és más olyan helyekhez közelít, ahol esetleg le kell lassítania vagy meg kell állnia, hogy elkerülje a forgalmat vagy az akadályokat.
- Haladás közben mindkét kezét tartsa a kormányon, és mindkét lábát az elektromos rolleren. Legyen nyugodt. Vezessen olyan helyzetben, hogy a térd és a könyök enyhén hajlított. Ne próbálja meg semmilyen tárgyat a kezében tartani. Ha bármilyen tárgyat kell vinnie, használja a rakománytartozékot, ha az a robogóval együtt van, vagy tartsa biztonságosan rögzítve a hátizsákot mindkét vállpánttal a testén.

- Soha ne kapcsolja be újra az elektromos rollert, és ne vezessen az elektromos rollerrel, miután az alacsony akkumulátorállapotot jelez, vagy lemerült akkumulátor biztonsági leállítást hajtott végre. Előfordulhat, hogy a robogónak nincs elég ereje a vezetéshez, különösen, ha hirtelen nagy teljesítményre van szüksége. Ha újraindítja a robogót, és folytatja a lovaglást, fennáll a leesés veszélye. Ezenkívül károsíthatja az akkumulátort, ami csökkentheti az akkumulátor élettartamát és kapacitását. Az ilyen károk a termékgarancia korlátozását vonhatják maguk után.
- Ha az úton kell felhajtania vagy át kell mennie, legyen nagyon óvatos – vezessen minél távolabb a nagy forgalomtól. Hagyjon elegendő időt az úton való átkeléshez. Ne feledje, hogy egy sebességkorlátozó vagy váratlan akadály lelassíthatja az átkelést.
- Ellenőrizze, hogy a közúti vezetést engedélyezi-e a törvény.
- Ne helyezzen rakományt a robogó állóhelyére. A kormányon lévő hasznos teher és a kormányra felfüggesztett egyéb tartozékok össztömege nem haladhatja meg a 4 kg-ot. Ennek a határértéknek a túllépése megzavarja a robogó egyensúlytartási képességét, és spontán gyorsulást okozhat, növelve a leesés és a készülék károsodásának kockázatát. Ha szükséges, mindig jobb, ha bármilyen terhet egy hátizsákban helyez el a hátán.
- Hagyjon rést maga és a kormány között. Ne hajoljon a kormány fölé, és ne lépjen rá. A kormány fölé hajlás vagy rátámaszkodás jelentősen növeli az irányítás elvesztésének, az ütközésnek és az esésnek a kockázatát. A kormányt úgy tervezték, hogy fenntartsa a stabilitást és a kanyarodást. Bármilyen imbolygás vagy támaszkodás a kormányon sérüléshez és leeséshez vezethet.
- Ne üljön elektromos robogóval, ha egyensúlyzavara van.
- A robogót nem orvosi eszköznek tervezték, tesztelték vagy hagyták jóvá. Segítség nélkül fel kell tudni szállni és le kell szállnia a robogóra, ami hasonló fizikai képességeket igényel, mint a lépcsőn való fel- és leszállás segítség nélkül és korlátba kapaszkodás nélkül.
- Az elektromos roller nem olyan gyermekek kezébe kerül, akik nem ismerik teljesen ezt a kézikönyvet, vagy akiknek tudása, érettsége és fizikai képességei a jármű biztonságos vezetéséhez nem biztosítottak. Általában azt javasoljuk, hogy a járművezetők legyenek 16 éven felüliek. A 18 éven aluli gyermekekért mindig a szülők vagy a gyámok felelősek.
- Az elektromos roller nem mutatóványozásra szolgál, nem szabad lépcsőn lemenni, járdaszegélyről vagy hasonló magas felületről leugrani, előre-hátra dőléssel túlzott nyomást gyakorolni a kormányra.
- Mindig győződjön meg arról, hogy a motoros megfelel a robogóra vonatkozó súlyhatároknak. Soha ne terhelje túl a robogót, mert károsíthatja a vázat és az alkatrészeket, ami a motoros sérüléséhez vezethet, és korlátozza a garanciát.
- Utazás után az elektromos robogót mindig száraz és meleg helyen kell tárolni. Az ideális tárolási hőmérséklet 10 és 25°C között van.
- Utazás után mindig törölje le és szárítsa meg az e-robogót egy ruhával, ha esőben utazott vagy vízzel érintkezett.
- Az elektromos robogó nem kereskedelmi használatra készült. Ezt a terméket hetente több órán át kell használni.
- Ha nedves vagy nedves környezetben történő használat vagy tárolás miatt korróziót észlel, azonnal cserélje ki az alkatrészt, a robogó nem használható tovább. Mindig javasoljuk, hogy konzultáljon a legközelebbi elektromos robogó szerviz szakemberével.
- A szükséges alkatrészeket (például fékek, csapágyak stb.) rendszeresen ellenőriztesse a legközelebbi elektromos robogó szervizben.

Az akkumulátor biztonsága és karbantartása

- Soha ne használja az akkumulátort, ha a burkolata sérült, szokatlan szagot, füstöt, túlzott hőt bocsát ki, vagy ha bármilyen anyag szivárog ki belőle. Kerülje az akkumulátorból szivárgó anyaggal való érintkezést.
- Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. Az akkumulátorfeszültségnek való kitettség végzetes lehet.

- Az akkumulátor eltávolítása vagy csatlakoztatása (csak a felhasználó által cserélhető akkumulátorral rendelkező modelleknél) vagy bármilyen szervizelés előtt válassza le a robogót a hálózatról vagy a tápegységről. Soha ne dolgozzon a robogó egyetlen alkatrészén sem, amíg az váltóáramra van csatlakoztatva. Súlyos áramütés okozta sérülést és a termék károsodását is kockáztathatja.
- Az akkumulátor cellái mérgező anyagokat tartalmaznak. Ne próbálja meg kinyitni az akkumulátort. Ne helyezzen be semmilyen tárgyat az akkumulátorba, és ne használjon semmilyen eszközt az elemtartó fedelének kinyitásához. Ha bármelyik tárgyat belehelyezi, elektromos áram megsérülhet, és égési sérülést vagy tüzet okozhat. Ha megpróbálja kinyitni az elemtartót, az megsérülhet, mérgező és káros anyagok szabadulhatnak fel, és a készlet használhatatlanná válik (a garancia elvesztése).
- Vegye figyelembe és tartsa be az akkumulátor figyelmeztető címkéjén található biztonsági tudnivalókat.
- Ha az akkumulátort nem tölti rendszeresen, az maradandó károsodást okozhat. Ha az akkumulátort áram nélkül hagyja, az idővel teljesen lemerülhet, ami károsíthatja azt. Töltse fel legalább kéthavonta egyszer. Ha teljesen lemerült akkumulátorral érkezik utazásról, töltse fel. Soha ne tárolja a lemerült akkumulátort hosszú ideig, mert ez visszafordíthatatlan károsodást okozhat.
- Csak eredeti töltőt használjon, és soha ne próbálja megkerülni a védelmi áramköröket. Soha ne használjon más elektromos robogókhoz vagy egyéb eszközökhöz tervezett töltőt.
- Ne mossa az elektromos rollert elektromos mosóval vagy nagynyomású tömlővel. Kerülje a víz bejutását a töltőcsatlakozóba. Töltés után mindig zárja le a töltőcsatlakozó fedelét.
- Ne tegye ki heves esőnek (beleértve a vezetést, tárolást vagy szállítást). Tisztítsa meg a készüléket szappannal és vízzel, valamint puha ruhával. A tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozó száraz. Ezen utasítások be nem tartása áramütés, sérülés, égési sérülés vagy tűz veszélyének teheti ki.
- Ne merítse vízbe az akkumulátort vagy az elektromos rollert. Ha azt gyanítja, hogy víz került az akkumulátorba vagy a robogóba, forduljon a legközelebbi e-robogó szervizhez, és ellenőriztesse a készüléket, mielőtt újra elindulna. További értesítésig a robogót függőleges helyzetben, szabadban, gyúlékony tárgyaktól távol tárolja. Ne próbálja meg eltávolítani az akkumulátort. Ne csatlakoztassa a tápkábelt a robogóra. Ezen utasítások be nem tartása áramütésnek, sérülésnek, égési sérülésnek vagy tüzet okozhat.
- Mint minden újratölthető akkumulátort, ezt ne töltse gyúlékony anyagok közelében.
- Töltés közben az akkumulátort és a töltőt felügyelni kell. Ne töltse az akkumulátort akkor sem, ha nincs otthon, vagy nem tudja felügyelni a töltési folyamatot.

Az akkumulátor töltése

- Az e-robogó akkumulátorának legjobb teljesítményének megőrzése érdekében töltse fel teljesen havonta egyszer vagy használat után, attól függően, hogy melyik következik be előbb. Csak akkor töltse az akkumulátort, ha az a megadott töltési hőmérsékleti tartományon belül van (0 °C és +45 °C között). A töltési idő az akkumulátor hőmérsékletétől függően változik – előfordulhat, hogy a túl meleg vagy túl hideg akkumulátor nem töltődik, vagy sokkal tovább tart a töltés. Az akkumulátor akkor tölt a leghatékonyabban, ha az ajánlott töltési hőmérsékleti tartomány közepén van.

Ne töltse az akkumulátort, ha a tárolási hőmérséklet 0°C (32°F) alatt van. Ehelyett vigye 10 °C (50 °F) feletti meleg környezetbe a töltéshez. Ez biztosítja a hosszú élettartamot és a teljesítményt. Ne csatlakoztassa a tápkábelt, ha a töltőcsatlakozó, a tápkábel vagy a hálózati aljzat nedves.

Az akkumulátor töltési eljárása

1. Helyezze a robogót tiszta és száraz helyre a töltéshez ajánlott hőmérsékleti tartományon belül.
2. Nyissa ki a töltőnyílás fedelét.
3. Ellenőrizze, hogy a töltőcsatlakozó, a tápkábel és a konnektor tiszta, száraz és szennyeződésmentes-e.
4. Dugja be a tápkábel másik végét a töltőcsatlakozóba (a zöld jelzőfény zöldre vált).

5. Dugja be a tápkábel első végét (a robogóval együtt) egy földelt váltakozó áramú aljzatba (100V–240V; 50Hz–60Hz). A tápkábelt megfelelően földelni kell (a töltő jelzőfénye pirosan világít).

6. Amikor a töltés befejeződött, a piros jelzőfény ismét zöldre vált.

JEGYZET: Az elektromos roller töltőrendszere automatikusan megakadályozza a túltöltést. Azonban ne töltse a robogót 12 óránál tovább.

A robogó leválasztása

Amikor az e-robogó használatra kész (feltöltött), húzza ki a tápkábelt, és zárja le a töltőport fedelét az alábbiak szerint:

1. Húzza ki a tápkábelt a földelt aljzattól.
2. Húzza ki a tápkábelt az elektromos roller töltőcsatlakozójából.
3. Csukja be a töltőport fedelét.
4. Mindig tartsa zárva a töltőcsatlakozó fedelét, kivéve az e-robogó töltésekor.
5. A töltőcsatlakozó fedelének bezárása megakadályozza, hogy víz, szennyeződés, por és egyéb törmelék kerüljön a töltőcsatlakozóba, és károsodjon a robogó.

Utasítás

- 1) Töltse fel a lítium akkumulátort a 0°C és +45°C közötti hőmérséklet-tartományban.
- 2) Fenntartja a töltést az elektromos robogó modelljéhez meghatározott ideig.
- 3) Csak a mellékelt töltőt használja az elektromos roller töltéséhez.
- 4) Ügyeljen a töltő bemeneti feszültségére (100 ~ 240 V).
- 5) Töltés előtt kapcsolja ki az elektromos rollert (kapcsolja ki az elektromos rollert).
- 6) Először győződjön meg arról, hogy a töltő csatlakoztatva van az elektromos rollerhez, majd csatlakoztassa a tápegységhez. Ellenkező esetben a töltőnyílás megsérülhet.
- 7) Ne helyezze a töltőt nedves helyre, nem érintkezhet vízzel.
- 8) Figyelmeztetés: Tartson 20 cm-es vagy nagyobb távolságot más tárgyaktól. Ne helyezze a töltőt kanapéra, ágyra vagy szőnyegre. Ne takarja le, és gondoskodjon a szellőzésről.
- 9) Ne helyezzen súlyokat vagy nehéz tárgyakat a robogóra és a töltőre.
- 10) Győződjön meg arról, hogy az e-robogót ne manipulálják töltés közben, mert ez olyan károsodást okozhat, amely érvényteleníti a garanciát. A készülék töltés közbeni kezelése szintén sérülést okozhat, és növeli az áramütés kockázatát.
- 11) A piros lámpa világít a töltés közben, és zöldre vált, ha kész. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a töltés befejezését követő 2 órán belül. Ne folytassa az akkumulátor töltését a megadott időn túl.

Töltési hibák

Ha a töltés során hibát észlel, a töltés leáll. Ellenőrizze a következőket:

- Ha a töltésjelző lámpák nem világítanak, ellenőrizze, hogy van-e váltóáram, és győződjön meg arról, hogy a tápkábel teljesen be van dugva a töltőportba.
- Ha van váltóáramú tápellátás, és a töltésjelző lámpák nem világítanak, az azt jelenti, hogy probléma van a töltővel. Lépjen kapcsolatba az e-robogó forgalmazójával.
- Töltés közben ne használjon rossz töltőt. Csak a mellékelt eredeti töltőt használja.
- Ne használjon egy töltőt több különböző típusú elektromos robogó töltéséhez. Még ha a töltő működik is, károsíthatja a rendszert.
- Ne szerelje szét a töltőt. Ha szervizre vagy javításra van szükség, forduljon az e-robogó forgalmazójához vagy a legközelebbi elektromos javítóműhelyhez.

Felületi töltés (részleges töltés)

- Ha nem tölti fel teljesen az e-robogó akkumulátorát, a felületi vagy részleges töltés befolyásolhatja az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzésének pontosságát. Ebben az esetben a ténylegesnél magasabb töltöttségi szintet mutathat.

- Bekapcsolás után ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét. Ezután vezessen legalább három percig, majd ellenőrizze újra a szintet. Ha ezalatt a kijelzőn alacsony töltöttségi százalék vagy kevesebb vonal jelenik meg, akkor az akkumulátor csak felületesen lett feltöltve. Ha szükséges, dugja vissza a robogót, és töltsse fel.

Hogyan befolyásolja a hőmérséklet a teljesítményt?

Az akkumulátorok általában lényegesen melegebbek a levegő hőmérsékleténél, a belőlük felszabaduló (vezetés közben) és időnként (töltéskor) hozzáadott hő miatt.

- Az akkumulátor akkor lesz a leghatékonyabb, ha az ajánlott üzemi hőmérsékleti tartományhoz a lehető legközelebb működik. Mint minden akkumulátor esetében, alacsony hőmérsékleten kevesebb energia áll rendelkezésre. Ha az elemek hidegek, előfordulhat, hogy nem tud megtenni olyan távolságot, mint amikor közelebb vannak a szobahőmérséklethez.

- Töltés előtt és közben az akkumulátor hőmérsékletének az ajánlott tartományon belül kell lennie. Az akkumulátor ajánlott töltési hőmérsékleti tartományára az alábbiak vonatkoznak: Az akkumulátor akkor tölt a leghatékonyabban, ha a legközelebb van az ajánlott töltési hőmérséklet-tartomány közepéhez. Ha az akkumulátorok túl melegek vagy túl hidegek, előfordulhat, hogy tovább tart a töltésük, vagy egyáltalán nem töltődnek.

- Azok az akkumulátorok, amelyek nulla vagy fagypont alatti hőmérsékleten működnek, csak az elektromos robogó kapacitásának 60%-át képesek biztosítani. Tartsa ezt szem előtt, ha ilyen alacsony hőmérsékleten tervezi lovagolni.

- Ha magas hőmérsékleten közlekedik, mindig ügyeljen arra, hogy a robogót lovaglás után árnyékban tárolja, soha ne takarja le takaróval vagy ruhával. Az akkumulátornak szabad helyhez kell jutnia. Ellenkező esetben az akkumulátor túlmelegedése maradandó károsodáshoz vezethet.

Akkumulátor csere

A robogó újratölthető lítium akkumulátorral működik. Normál használat és megfelelő karbantartás mellett 500-1000 teljes feltöltéssel egyenértékűnek kell lennie. Ahogy az akkumulátor élettartama végéhez közeledik, gyakrabban kell tölteni, és a robogó hatótávolsága csökkenni fog.

Csereakkumulátor megrendeléséhez lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a legközelebbi e-robogó szervizközponttal.

Akkumulátor karbantartás

Ne helyezze az akkumulátort 50°C-nál magasabb hőmérsékletű vagy -20°C alatti hőmérsékletű környezetbe (például ne helyezze az akkumulátort nyári hőmérsékletnek kitett autóba).

Ne tegye tűzbe az akkumulátort, különben meghibásodhat, túlmelegedhet, sőt tüzet vagy robbanást okozhat.

További akkumulátor-karbantartási intézkedések az akkumulátor adattábláján találhatók. Kerülje az akkumulátor teljes lemerülését és újratöltését. Próbálja meg a lehető legtöbbet használni - ez jelentősen meghosszabbítja élettartamát. Ezenkívül szobahőmérsékleten használva az akkumulátor nagyobb hatótávolságot és teljesítményt érhet el; Ha 0°C alatti hőmérsékletű környezetben használja, az akkumulátor élettartama és teljesítménye csökken. Általában -20°C-on az utazótávolság csak fele vagy annál kisebb lehet, mint normál hőmérsékleten. Amint a hőmérséklet emelkedik, az akkumulátor hatótávolsága helyreáll.

A teljesen feltöltött akkumulátor körülbelül 60-90 nap készenléti állapot után lemerül; ha nincs teljesen feltöltve, körülbelül 20-40 nap készenléti állapot után lemerül. Ha ez idő alatt nem töltődik fel időben, az akkumulátor túlságosan lemerülhet és megsérülhet. Ez a kár helyrehozhatatlan, és nem vonatkozik rá az ingyenes jótállás, amely a hosszan tartó töltés hiánya miatt keletkezett.

Tilos az akkumulátort önkényesen szétszedni, mert az áramütés vagy rövidzárlat miatt súlyos biztonsági baleseteket okozhat.

Tárolási ajánlások

Az akkumulátor tárolása és töltése 10-35 °C hőmérsékleten, alacsony páratartalom mellett és nem korrozív gázatmoszférában.

Hosszú távú tárolás:

Hosszú távú tároláshoz (több mint 3 hónapig) tárolja a lítium akkumulátort 10-20°C hőmérsékleten, alacsony páratartalom mellett és nem korrozív gázatmoszférában.

Elektromos robogó karbantartása

A robogót úgy tervezték, hogy szinte karbantartásmentes legyen. Indulás előtt azonban mindig győződjön meg arról, hogy tiszta, minden alkatrész be van szerelve és megfelelően működik, az akkumulátor fel van töltve és a gumik megfelelően fel vannak fújva. Soha ne nyissa fel a robogót – a kijelzőt vagy a motort. Ezek nem a felhasználó által javítható alkatrészek.

A következő műveletek végrehajtása előtt győződjön meg arról, hogy az e-robogó ki van kapcsolva és ki van húzva a konnektorból.

1. Az elektromos roller felemelése

Vigyázz az ujjaidra! Amikor felemeli a robogót, ne fogja meg a gumiabroncsokat, a sárvédőket vagy a kerekeket, mert ez becsípheti vagy becsípheti a kezét vagy az ujjait, ami sérülést okozhat. A 15 kg feletti modelleknél azt javasoljuk, hogy két együttműködő emberrel emeljék fel a robogót.

2. Gumiabroncsok és keréktárcsák karbantartása

- Ha a roller felfújható kerekekkel rendelkezik, ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok nyomása megfelelő-e. A nagyobb nyomás csökkenti a felfüggesztés teljesítményét és a tapadást, és növeli az e-robogó feletti uralma elvesztésének, az ütközéseknek és az eséseknek a kockázatát. Az alacsonyabb nyomás csökkenti a hatótávolságot, és növeli a gumiabroncs/kerék szerelvény sérülésének kockázatát. Az egyenetlen nyomás hatására az e-robogó az alacsonyabb nyomású gumiabroncs irányába fordul.

- Az e-robogó biztonságos és hatékony működésének biztosítása érdekében rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsokat és a kerekeket, különösen, ha nemrégiben szervizelte a gumiabroncs/kerék szerelvényt.

3. Ellenőrizze a gumiabroncs és a kerék egységet

1. Győződjön meg arról, hogy a roller ki van húzva és ki van kapcsolva.

2. Ellenőrizze a kerék megingását úgy, hogy megfogja a gumiabroncs/kerék egységet, és megpróbálja oldalra mozgatni. Ha a kerék ingadozását észleli, ellenőrizze a kerékanyát, és szükség esetén húzza meg.

3. Ellenőrizze az abroncsnyomást a pneumatikus abroncsokkal felszerelt modelleken. Az elektromos robogó gumiabroncsai rugózást és tapadást biztosítanak. Mindkét funkciót befolyásolja az abroncsnyomás.

Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

- Győződjön meg arról, hogy a robogó ki van húzva és ki van kapcsolva.

- Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását. A nem megfelelően felfújott gumiabroncsok az optimálisnál kisebb hatótávolságot eredményeznek.

- Ha a nyomás mindkét gumiabroncsban nem éri el az Ön elektromos robogójának abroncsán feltüntetett értéket, fújja fel az abroncsot az előírt nyomásra.

- Ellenőrizze, hogy mindkét abroncs egyformán felfúj-e és szennyeződésmentes-e.

4. Az elektromos roller tisztítása

Ne tisztítsa a padlót vagy a gumibroncsokat semmilyen speciális tisztítószerrel. Az ilyen eszközök használata csökkentheti a tapadást és növelheti a leesés kockázatát.

Tisztítsa meg az elektromos rollert az alábbiak szerint:

- Győződjön meg arról, hogy a robogó ki van húzva és ki van kapcsolva.
- Töltés után és tisztítás előtt mindig zárja le a töltőcsatlakozó fedelét.
- Óvatosan tisztítsa meg a robogót szappanos vízzel és puha ruhával.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos roller ne érintkezzen folyó vízzel.
- Ne mossa az elektromos rollert elektromos mosóval vagy nagynyomású tömlővel.
- Akadályozza meg, hogy víz kerüljön a töltőcsatlakozóba. Töltés után mindig zárja le a töltőcsatlakozó fedelét.
- Ne tegye ki heves esőnek (beleértve a vezetést, tárolást vagy szállítást). Tisztítsa meg szappannal és vízzel, valamint puha ruhával. A tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozó száraz. Ezen utasítások be nem tartása áramütés, sérülés, égési sérülés vagy tűz veszélyének teheti ki.
- Ne merítse vízbe az akkumulátort vagy a fém testet. Ha azt gyanítja, hogy az akkumulátor vagy a fém test vízzel érintkezett, forduljon a forgalmazóhoz vagy a legközelebbi e-robogó szervizhez.
- További értesítésig az e-robogót függőleges helyzetben, szabadban, gyúlékony tárgyaktól távol tárolja. Ne próbálja meg eltávolítani az akkumulátort. Ne csatlakoztassa a tápkábelt a robogóra. Ezen utasítások be nem tartása áramütésnek, sérülésnek, égési sérülésnek vagy tüzet okozhat.

5. Elektromos robogó szervíz

- Mindig kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt, mielőtt bármilyen karbantartást végez, vagy bármilyen alkatrészt vagy tartozékot felszerel az elektromos rollerre.
- Ne próbálja meg kinyitni az elektromos rollert. Nincsenek benne olyan alkatrészek, amiket az átlag felhasználó meg tudna javítani. A robogó kinyitásával áramütés okozta sérülést kockáztat. Ezenkívül érvénytelenítheti a korlátozott garanciát, károsíthatja a robogót, és nem biztonságosan használható.
- Ne nyissa ki a motort. A motor belsejében nincsenek olyan alkatrészek, amelyeket rendszeres felhasználó megjavíthatna. Ez károsíthatja az e-robogót, és nem biztonságosan használható.
- Csak elektromos robogókhoz jóváhagyott alkatrészeket, rögzítőelemeket és tartozékokat használjon.
- Viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben súlyos sérülés következhet be.
- Mindig ajánlott felvenni a kapcsolatot bármely professzionális e-robogó szervizzel.
- Javasoljuk, hogy legalább 1000 kilométerenként, vagy minden szezon kezdete előtt tartsa be a szervizintervallumot – attól függően, hogy melyik következik be előbb.

6. Az első menet előtt

- A kézikönyv figyelmes elolvasása után győződjön meg arról, hogy a roller megfelelően van összeszerelve. Győződjön meg arról, hogy minden csavar meg van húzva, és a fékek működőképesek, valamint minden utazás előtt.
- Ha a robogó felfújható kerekekkel van felszerelve, ellenőrizze a nyomást közvetlenül a gumibroncson található információk alapján.
- A legtöbb elektromos robogónak mozgási energiára van szüksége az induláshoz, ezért nem tud álló helyzetből elindulni. A robogót tolással kell elindítani, és ha stabilitást nyert, nyomja meg a gázkart.
- Tegye meg első útját a legalacsonyabb sebességű üzemmódban, amíg alaposan meg nem ismeri az elektromos roller viselkedését, különösen akkor, ha nincs ezzel kapcsolatos tapasztalata.

Garancia

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta az Aerium elektromos robogót. Elektromos robogó vásárlása után gondosan őrizze meg a vásárlást igazoló bizonylatot, amely jótállási jegyként is szolgál. A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a kapott robogótól. A robogó teljesítménye és konfigurációja időről időre javulhat, és előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

Körülmények

Ez a garanciaésfedezi azokat a károkat, amelyek a vevőhöz történő szállítás során keletkeznek - például előfordulhat, hogy a motor nem működik, vagy az akkumulátor nem biztosít áramot.

Nem vonatkozik azokra a sérülésekre, amelyek a szállítás során keletkeztek, és amelyekről a vásárló nem értesítette időben az eladót (azaz a fuvarozótól való átvételtől számított 24 órán belül, ha a csomagolás sérült, kárjegyzőkönyvet kell készíteni).

A robogóra a vásárlástól számított 24 hónapos garancia vonatkozik.

Jegyzet:A garancia nem vállalható az alábbi esetekben::

- A fogyó és gyorsan kopó alkatrészekre nem vonatkozik a garancia: LED lámpák, gumik és belső tömlők, komplett fékrendszer készlet, fékkábel, műanyag alkatrészek és burkolatok stb.
- Minden olyan felhasználó által okozott kár, amely például gázolás, helytelen hozzáférés, nem megfelelő kiegészítők használata vagy esés, lépcsőzés, ugrás és akrobatika, a kormány túlzott meghúzása vagy például túlzott hajlás vagy a kormányon való hajlás miatt következik be. Hasonlóképpen, ha nem végeznek rendszeres szervízt, ami az elektromos robogó használati gyakoriságától függ.
- Az akkumulátorra 6 hónap garancia vonatkozik. A vásárló a fogyasztási cikkben fellépő hibára a termék megvásárlásától számított 24 hónapon belül jogosult érvényesíteni. Ez nem vonatkozik az elemek és akkumulátorok élettartamára.

A kapacitáscsökkenés nem hiba, hanem az akkumulátor természetes jellemzője. Mivel az áru normál használata során kopás lép fel, a garancia csak akkor érvényesíthető, ha az akkumulátor sérült. Élettartamát leggyakrabban a töltési ciklusok számához, de a töltési, kisütési és tárolási módhoz is kötik. Ezért 6 hónapos átalánydíjas élettartamot alkalmaznak. De itt az akkumulátor élettartamáról van szó, nem a szavatossági idejéről!

A törvényben előírt 24 hónapos időszak letelte után a szokásos módon igényelheti az akkumulátort, mint bármi mást. Például, ha az akkumulátor egy része a normál használat során szerkezeti vagy rejtett anyaghiba miatt kilazul, valószínűleg ez panaszra adhat okot. Az akkumulátor kapacitásának csökkenése azonban nem igényelhető 6 hónapnál hosszabb időszak után. A kapacitás csökkenése az akkumulátor élettartamával függ össze. Ez egy természetes jelenség, amelyet a töltési ciklusok száma, a töltési, kisütési és tárolási módok is befolyásolnak. Ha néhány hétig teljesen lemerülve hagyja a lítium akkumulátort, előfordulhat, hogy már egyáltalán nem lehet tölteni. Ebben az esetben már nem akkumulátor hibáról van szó, ami a rutin karbantartás elmulasztása és a felhasználó általi helytelen tárolás miatt keletkezett.



A robogó használata után kapcsolja ki az áramellátást, nehogy a gázpedál véletlen megérintése miatt elinduljon.

FIGYELEM!

A robogó nem megfelelő használata és/vagy a használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat. Az eladó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő sérülésekért, ha nem követi ezeket az utasításokat.

1. Robogó és tartozékok

Robogó




Kiegészítők



Töltő adapter



Onrangok

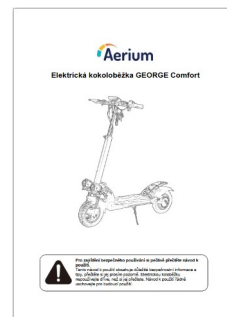

Kézikönyv

2. Alkatrészek leírása



3. Hogyan szereljük össze egy robogót

A robogót szinte teljesen összeszerelve szállítjuk. Az alkatrészek szállítás közbeni védelme érdekében azonban egyes alkatrészeket külön csomagolnak. Tehát meg kell tennie néhány lépést az első utazás megkezdése előtt.

1. Az első lépés az építéskijelző. A szállítás közbeni védelem érdekében külön csomagolva van. Csavarja ki a két csavart a kormány elején, helyezze rá a kijelzőszándékot, helyezze be, igazítsa össze a furatokat, helyezze be a csavarokat és húzza meg őket erősen.

2. A következő lépés a lámpák felszerelése. Óvatosan csomagolja ki a lámpákat, csavarja ki az anyákat és távolítsa el a csavarokat a foglalatból. Helyezze a hüvelyt az első rúdra, és rögzítse a csavarokkal és anyákkal. Húzza meg egyenletesen a csavarokat mindkét oldalon, hogy biztosítsa a lámpa biztonságos és megfelelő rögzítését. Végül ellenőrizze fények beállítását. -Ha szükséges, a beállításokat az egyes lámpák foglatainak lazításával lehet módosítani (az alsó oldalukon).


3. A harmadik lépés az összes csavar és anya ellenőrzése és meghúzása. A szállítás közbeni védelem érdekében egyes alkatrészek nincsenek rögzítve. Ezek elsősorban a fékkarok, a gázkar, a kormányvezérlő gombok és a fényszórók. Állítsa be a pozíciójukat ízlése szerint, és húzza meg erősen, hogy ne mozduljanak el lovaglás közben.!

ÉRTESÍTÉS: Vezetés előtt ellenőrizze, hogy minden csavar és anya szorosan meg van-e húzva. A csavarok meghúzásának elmulasztása balesethez és sérülésveszélyhez, illetve az elektromos roller károsodásához vezethet.

4. Ellenőrizze és állítsa be a fékeket. Az első utazás előtt győződjön meg arról, hogy a fékek megfelelően működnek és megfelelően vannak beállítva. A fékek ellenőrzéséhez nyomja meg a fékkart. A megfelelően beállított fékkarnak körülbelül az útja felénél be kell kapcsolnia. Ha a kar túl közel kapcsolódik a kormányhoz (ami azt jelzi, hogy a kábel túl szoros), vagy túl messze (ami azt jelzi, hogy a kábel túl laza), a fékkábel feszességét be kell állítani. Ha a fékkar túl gyorsan vagy túl lassan reagál, a kábel feszességét újra be kell állítani.

Fékkábel beállítása (az eljárás ugyanaz az első és a hátsó fékeknél)

- Lazítsa meg a féknyereg csavarját, és állítsa be a kábel feszességét úgy, hogy a kar a megfelelő pillanatban kezdjen bepattanni –hozzávetőlegesen fele körülannakdrága.
- Hétfőbeállítás Ellenőrizze, hogy a kar nincs-e túl közel a kormányhoz, vagy nem túl laza.
- Ellenőrizze, hogy a féknyereg csavarja jól meg van-e húzva!

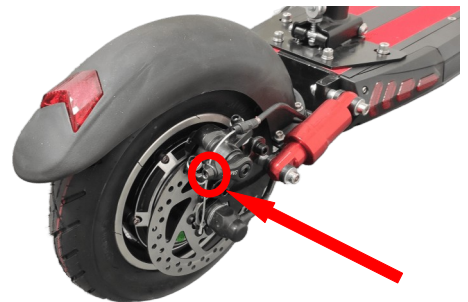

ÉRTESÍTÉS: Rendszeresen ellenőrizze és állítsa be a fékeket a megfelelő működés érdekében. A helytelenül beállított vagy kopott fékek negatívan befolyásolhatják a vezetés biztonságát. Ha a fék túl korán vagy túl későn kapcsol be, azonnal végezze el a beállításokat, hogy elkerülje a baleseteket, sérüléseket vagy a robogó károsodását.

5. Ellenőrizze a gumiabroncs nyomását:

A robogó gyárilag alulfújttal kerül kiszállításra, ezért az első menet előtt szükséges azokat megfelelően felfújni. A nem megfelelően felfújttal való közlekedés veszélyes! Az ajánlott nyomás közvetlenül az abroncs oldalfalán van feltüntetve. (általában 2,5-3,1 bar).

-A túl alacsony nyomás a stabilitás elvesztését, rossz irányíthatóságot és a gumiabroncs defektjének kockázatát okozhatja.

-A túl nagy nyomás csökkenti a tapadást, rontja a vezetési kényelmet és növeli a megcsúszás kockázatát.


A nem megfelelő gumiabroncsnyomás súlyos balesethez, sérüléshez vagy a robogó károsodásához vezethet.

Rendszeresen ellenőrizze a nyomást, és győződjön meg arról, hogy a gyártó ajánlásainak megfelelő értéken van.

6. Ülés beszerelése (opcionális)

Az ülés a robogó dobozában található. Összeszerelése egyszerű:

1. Csavarja ki a csavarokat, ahol a robogó rögzítve van (lásd a képet)
2. Helybázisszerelőüléseklyukakata roller deszkán, és igazítsa be a csavarlyukakat.
3. A szerszámtáskában található hosszabb csavarok segítségével erősen rögzítse az ülés alját a táblához. Egyenletesen húzza meg a csavarokat, hogy biztosítsa az ülés stabilitását és biztonságos rögzítését.
4. Helyezze be az ülést az alapba, és húzza meg a gallért az óramutató járásával megegyező irányba forgatva. Hagyjon egy kicsit lazát, hogy az ülés fel-le csússzon.
5. Állítsa be az ülés magasságát tetszés szerint, majd rögzítse szilárdan a bilincset.
6. Vezetés előtt ellenőrizze a rögzítés erősségét.

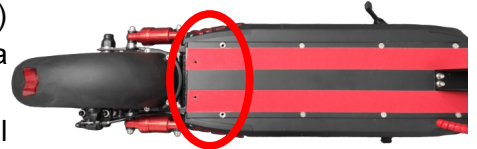

7. A kormány magasságának beállítása:

1. Lazítsa meg a hüvelyt
2. Állítsa be a kormány magasságát
3. Húzza meg a hüvelyt

A kormányszáron lévő gyorskioldó kapcsolót úgy kell beállítani, hogy záraskor ellenállást biztosítson, és felülről tolvá a kormány ne csússzon lefelé. Ha a hüvely túl laza, nyissa ki, húzza meg az anyát a tengelyen, és húzza meg a hüvelyt.

8. Ülésmagasság állítás:

Az ülés magasságának beállításához kövesse a fentebb a kormánymagasság beállításánál leírt eljárást.

4. Hogyan töltsük fel a robogót:



1. Töltés előtt mindig győződjön meg arról, hogy az elektromos roller ki van kapcsolva! Ellenőrizze azt is, hogy a töltőcsatlakozó, a kábel és a konnektor száraz-e és tiszta-e.

2. Nyissa ki a töltőport szilikon védőburkolatát, és csatlakoztassa a töltőadapter egyik végét a töltőporthoz.
3. Dugja be a töltőadapter másik végét egy földelt váltóáramú aljzatba.
4. Ha a töltőn lévő jelzőfény pirosan világít, az azt jelenti, hogy az akkumulátor töltődik. Amikor a töltés befejeződött, a jelzőfény zöldre vált, jelezve, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
5. A töltés befejezése után feltétlenül zárja le a töltőcsatlakozó szilikon fedelét, hogy ne kerüljön be szennyeződés vagy víz, ami károsíthatja a robogót.

5. Vezérlés leírása



6. A robogó be/kikapcsolása

1. Nyomja meg a gombot a roller bekapcsolásához. A kijelzőn egy lakat szimbólum jelenik meg.
2. A robogót kétféleképpen oldhatja fel:
 - Első módszer: A robogó feloldása NFC kártya segítségével. Ebben az esetben csak érintse meg az NFC-kártyát a kijelzőn. Ha a feloldás sikeres, sípoló hangot fog hallani, és a kijelző világít.
 - Második módszer: A robogó feloldása biztonsági jelszóval. A zárolás feloldásához meg kell adnia a helyes jelszót. A futásteljesítmény első három számjegye a jelszóbeviteli terület. A háromjegyű biztonsági jelszó a „+” és „-” gombok rövid megnyomásával szerkeszthető. Röviden nyomja meg a robogó be-/kikapcsoló gombját az első számjegy megerősítéséhez és a következő számjegyre lépéshez. A harmadik számjegy beírása után nyomja meg ismét a robogó be-/kikapcsoló gombját a jelszó megerősítéséhez. Ha a megadott jelszó helyes, sípoló hangot fog hallani, és a robogó feloldódik. Ha helytelen jelszót ad meg, hangjelzés hallható, a kijelző zárolva marad, és a jelszó törlődik. Ebben az esetben meg kell ismételnie a folyamatot, és be kell írnia a helyes jelszót.

MEGJEGYZÉS: A gyári alapértelmezett jelszó "000". Javasoljuk, hogy a lehető leghamarabb változtassa meg jelszavát. A jelszavát a robogó menüjében a P14 kód alatt módosíthatja - további információért lásd a Funkció leírása részt.

A roller feloldásának módja a beállítások menüben is állítható. A feloldás NFC kártyával P05 kóddal engedélyezhető/letiltható, a jelszóval történő feloldás P13 kóddal engedélyezhető/letiltható. További információkért lásd a Funkció leírása részt.

3. A roller kikapcsolásához tartsa lenyomva a roller off gombot 3 másodpercig. A robogót úgy is lezárhatja, hogy megérinti egy NFC kártyával.

A robogó néhány perc tétlenség után automatikusan kikapcsol (a kikapcsolási idő állítható - P04 kód a Funkció leírása részben). Ha több mint 15 napig nem használja a robogót, az automatikusan mélyalvás módba lép. Ebben az esetben a robogó nem oldható fel az NFC-kártyával. Ebben az esetben meg kell adnia egy biztonsági jelszót.

7. Vezérlőgombok



- A „+” és „-” gombok rövid megnyomásával beállíthatja a robogó sebességi mód. Az alapértelmezett beállítás az 1. sebességfokozat.
- A világítás gombjának rövid megnyomásával be- vagy kikapcsolható az első és a hátsó lámpa.
- Tartsa lenyomva a kürt gombot a hangjelzés aktiválásához. A gomb elengedése automatikusan kikapcsolja a kürtöt.
- Tartsa lenyomva az „M” gombot 5 másodpercig a beállítások megadásához. A beállítások módban az 'M' gomb rövid megnyomásával görgetheti az egyes paramétereket (P00-P20). Az értékeket a '+' és '-' gombokkal szerkesztheti. Az 'M' gomb lenyomva tartása menti a beállításokat és kilép a beállítási módból. A beállítási mód 10 másodperces inaktivitás után is automatikusan kikapcsol.

8. A funkciók leírása

Funkció	Alapértelmezett érték	Leírás
P00	000	Belépés alacsony fogyasztású alvó üzemmódba. Miután 1-re állítja és lenyomva tartja az "M" gombot, a készülék automatikusan kikapcsol és alvó módba lép. Az újraaktiválás csak a bekapcsoló gomb nyomva tartásával lehetséges.
P01	003	Háttérvilágítás fényerejének beállításai: 1 = legsötétebb; 3 = legfényesebb.
P02	000	A megtett távolság mértékegységeinek beállítása: 0 = km/h; 1 = mérföld/óra.
P03	048	Feszültségszint: 24V, 36V, 48V, 52V, 60V. NE MÓDOSÍTSA EZT AZ ÉRTÉKET.
P04	005	Az üresjárat idő beállítása (percben): 0 = nincs alvás; 1-60 = az alvó üzemmódba lépés ideje.
P05	001	NFC feloldási beállítások. 0 = NFC ki; 1 = NFC bekapcsolva.
P06	10.0	Kerékátmérő beállítása (mértékegysége: 0,1 hüvelyk, pontosság 0,1). Nem kell beállítani.
P07	030	A sebesség mérésének módszere. NE MÓDOSÍTSA EZT AZ ÉRTÉKET.
P08		Sebességkorlátozás beállításai. Tartomány: 0 - 100%.
P09	000	Az indítási mód beállítása. 0 = nulla indítás (állásból indulva); 1 = indítás

		(indítás után).
P10	000	A töltöttségi szint kijelzésének beállítása. 0 = valós idejű feszültség; 1 = töltöttségi szint százalékban.
P11	003	Az elektromos fék hatékonyságának beállítása. Tartomány 0-5. 0 = kikapcsolva; 1 = leggyengébb; 5 = legerősebb.
P12	003	Gyorsulási erő beállítása. Tartomány: 1-5. 1 = leggyengébb; 5 = Legerősebb.
P13	001	PIN-kód feloldási beállítások. 0 = PIN letiltva; 1 = PIN engedélyezve.
P14	000	PIN beállítások. Nyomja meg és tartsa lenyomva az "M" gombot az aktuális jelszó megjelenítéséhez, és lépjen be a szerkesztési módba. Nyomja meg a „+” és „-” gombokat az első számjegy beállításához. A következő számjegyre lépéshez nyomja meg a bekapcsológombot.
P15	40,0	Feszültségcsökkenés elleni védelem. NE MÓDOSÍTSA EZT AZ ÉRTÉKET. Fennáll az akkumulátor károsodásának veszélye.
P16		A megtett távolság visszaállítása. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot 5 másodpercig. A megtett távolság visszaállításra kerül.
P17	000	A tempomat funkció beállításai. 0 = tempomat kikapcsolva; 1 = tempomat be van kapcsolva
P18		Gyári beállítások visszaállítása. Ebben az üzemmódban tartsa lenyomva a "+" gombot 3-5 másodpercig. A P18 P---re változik, és kilép a beállítások menüből.
P19		Kártyapárosítási mód. NE MÓDOSÍTSA EZT A MÓDOT.
P20	004	Kommunikációs protokoll beállításai. NE MÓDOSÍTSA EZT AZ ÉRTÉKET.

9. Hogyan kell összecsukni és szállítani egy robogót

Az elektromos roller összetétele

A roller összecsukható a könnyebb szállítás érdekében. Az összecsukható mechanizmus biztonsági berendezéssel van felszerelve a spontán összehajtás ellen.

1. Összetétel:

- Először oldja ki az összecsukható mechanizmus zárját.
- Nyomja meg az összecsukható mechanizmus kart a kioldáshoz.
- Hajtsa a kormányrudat a hátsó sárvédő felé, amíg kattánást nem hall. Ezen a ponton a mechanizmus rögzítve van, és a robogó biztonságosan szállítható vagy tárolható.

2. Elrendezés:

- Nyomja meg az összecsukható mechanizmus kart, és emelje vissza a kormányoszlopot eredeti helyzetébe, amíg kattánást nem fog hallani.
- Biztosítsa a biztonsági berendezést véletlen behajtás ellen.

ÉRTESÍTÉS:

Minden utazás előtt győződjön meg arról, hogy az összecsukható mechanizmus zárja megfelelően be van kapcsolva. A rögzítetlen mechanizmus a robogó károsodásához, a motoros sérüléséhez vagy harmadik személyek sérüléséhez vezethet.

Kormány összetétele



A kormány összecsuksához húzza kifelé a záróhüvelyeket (a nyilak szerint). Elengedésük után a kormány szabaddá válik, és lehajtható. A kinyitáshoz egyszerűen emelje fel őket, amíg a reteszelő hüvelyek vissza nem pattannak a helyükre.

MEGJEGYZÉS: Hagyja, hogy az e-robogó beálljon (betörjön), és minden mozgó alkatrészt, például felfüggesztést és fékeket a megfelelő helyzetbe állítson. Az első néhány hónapban fordítson fokozott figyelmet, és következetesen ellenőrizze az összes csavar, anya és mozgó alkatrész meghúzását.

10. Hogyan kell robogóval közlekedni

1. Értesítés: Viseljen sisakot és térdvédőt, különösen, ha még csak most kezdi az utazást, és még nem ismeri az elektromos robogót.

2. Ez az elektromos roller csak egy személy számára készült. Tilos másokat hordozni, vagy gyermeket a karjában tartani.

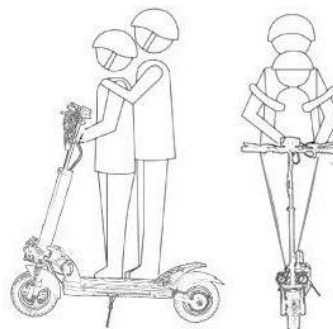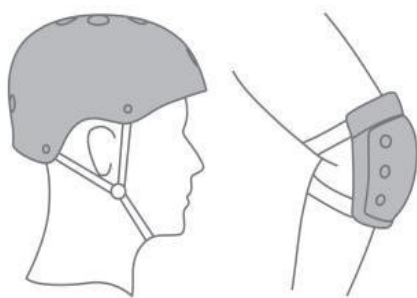

3. Kerülje az elektromos robogó használatát kedvezőtlen időjárási körülmények között, például esőben, hóban és erős szélben, hogy elkerülje a szükségtelen károkat, baleseteket és sérüléseket.

4. Ne használja az elektromos robogót, ha a külső hőmérséklet -5°C alá esik.





5. A 4 cm-nél mélyebb tócsákon áthajtani tilos.

6. Kerülje az e-robogó csúszós, vizes vagy jeges felületen való vezetését, hogy elkerülje a csúszás és az elesés kockázatát. Ilyen körülmények között jelentősen romlik a fékteljesítmény és a gumibroncsok tapadása az úton, ami megnehezíti a sebesség szabályozását, és növeli a robogó feletti uralma elvesztésének kockázatát.





7. Tilos elektromos robogóval közlekedni olyan autópályákon, amelyeket kizárólag gépjárművekre terveztek. Hasonlóképpen tilos a járdán közlekedni. Indulás előtt mindig ismerkedjen meg a helyi közlekedési szabályokkal, és győződjön meg arról, hogy hol szabad elektromos rollerrel közlekedni.

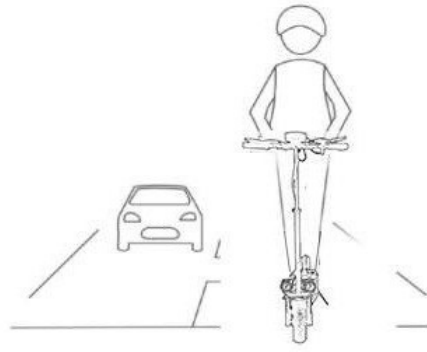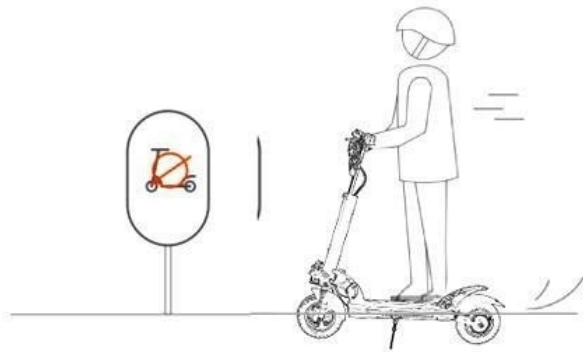

8. Vezetés közben ne végezzen veszélyes manővert. Mindig tartsa mindkét kezét a kormányon, és mindkét lábát szilárdan a robogó lábtartóján.

9. Kerülje el az akadályokat és a lyukakat. Ha gördöngyös úton halad, ajánlatos enyhén behajlítani a térdét, és kisebb sebességgel haladni. Ha a terep veszélyes, próbáljon meg mindig megállni és leszállni a rollerről.

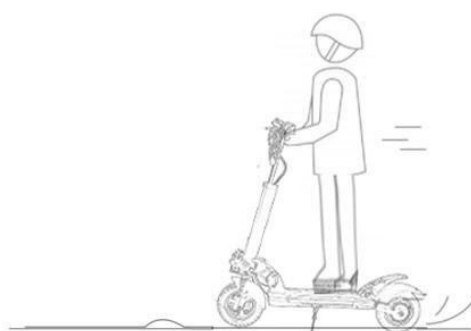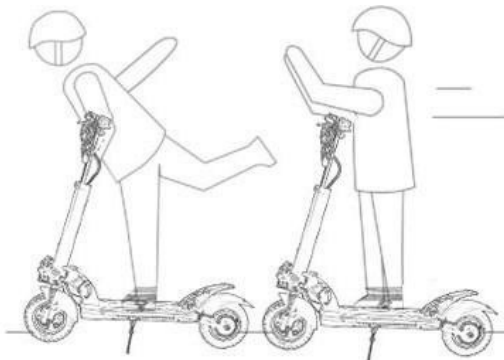

10. Biztonsága érdekében tartsa sebességét 25 km/h alatt. Ha lehetséges, kerülje az éjszakai használatát. Ha éjszaka kell használnia a terméket, kapcsolja be az első és a hátsó lámpákat, és tartsa 15 km/h-n vagy kevesebben a sebességet.

11. Hosszú lejtőn lefelé ne gyorsítson.





12. Ne próbáljon hátizsákokat vagy más nehéz tárgyat a kormányra akasztani.

13. Ezt a terméket csak a kézikönyvben leírtak szerint használja. Ne lépje túl az ajánlott maximális terhelhetőséget.



14. Ne érintse meg a fékeket. Lovaglás után forróak lehetnek, és égési sérüléseket okozhatnak.

15. Amikor elektromos robogóval közlekedik, mindig figyeljen a körülötte zajló eseményekre, és legyen éber. Tisztelje a többi közlekedőt, és gondoskodjon a gyalogosok biztonságáról.

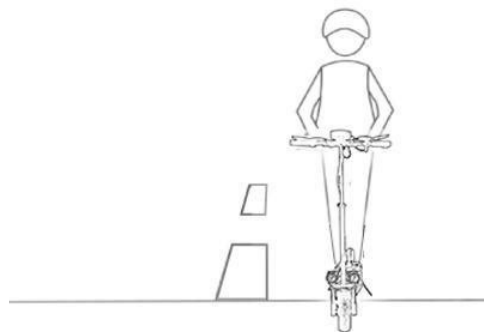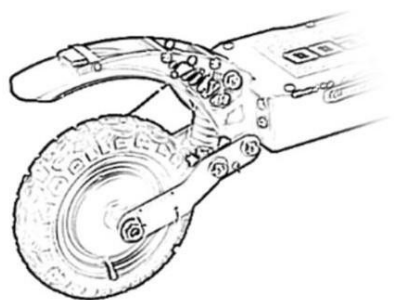

11. Műszaki adatok

Elektromos robogó	Név	GEORGE Comfort
Méretek	Összetett (dx-velxbe)	1100 x 240 x (40 - 60) mm
	Kiterjesztett (dx-velxbe)	1110 x 240 x (80 - 120) mm
Súly	Nettó tömeg	23 kg
Lovas	Maximális terhelés	150 kg
	Ajánlott magasság	140-220 cm
A robogó paraméterei	Maximális sebesség	25 km/h
	Hatótávolság	45-55 km (a környezettől, a vezetési sebességtől, a tereptől, a vezetési szokásoktól és egyéb tényezőktől függően).
	Maximális emelkedés	25%
	Kerékméret	10 hüvelyk
	Gumiabroncs típus	Gumi, felfújható
	Felfüggesztés	Elöl és hátul
	Fékek	Motorfék, tárcsafék (elöl és hátul)
	Világítás	Elöl, hátul, irányított
	Motor teljesítmény	800W(hátsó kerék)
Az akkumulátor paraméterei	Akkumulátor típusa	Lítium
	Az akkumulátor kapacitása	15Ah, 48V
Töltő adapter	Névleges bemeneti feszültség	100V – 240V AC 50/60Hz
	Névleges kimeneti feszültség	54,6, 2A
	Töltési idő	6-8 óra

INFORMÁCIÓ:

1. A robogó hatótávolsága eléri a 40-55 km-t, mérnökeink az alábbi vizsgálati szabványok szerint tesztelték:

A. Lovas súlya: 75 kg.

B. A lovas nyáron és 18 km/h sebességgel közlekedik.

2. Télen a maximális hatótáv 20-30%-kal csökken.

12. Napi karbantartás és tárolás:

Hogyan tisztítsuk és tároljuk az elektromos robogót

Az e-robogó optimális teljesítményének és hosszú élettartamának megőrzése érdekében fontosnak rendszerezően tiszta. Tisztítás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a roller ki van kapcsolva. A felület károsodásának elkerülése érdekében használjon puha ruhát vagy szivacsot a tisztításhoz. A tisztításhoz vizet használhat megfelelő tisztítószerrel. Ne használjon alkoholt, benzint vagy más maró hatású termékeket vagy illékony vegyi oldószereket, amelyek súlyosan károsíthatják a robogó felületét és megzavarhatják a belső alkatrészek szerkezetét. Kerülje továbbá a súroló hatású tisztítószer használatát, amelyek visszafordíthatatlan károkat okozhatnak.

Ne használjon nagynyomású tisztítót, mert károsíthatja az elektromos alkatrészeket és a csapágycsapat.

Figyelmeztetés: Győződjön meg róla, hogy a roller KI van kapcsolva. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a töltőcsatlakozó le van zárva a szilikon fedéllel. Gondosan tisztítsa meg a töltőcsatlakozó környékét, nehogy víz kerüljön be. Tisztítás után javasoljuk, hogy hagyja alaposan megszáradni a robogót.

Elektromos robogó akkumulátorának karbantartása:

1. Ne cserélje ki az akkumulátort más márkájú akkumulátorra.
2. Ne kísérelje meg szétszerelni az akkumulátort, és kerülje a rövidzárlatot. Ellenkező esetben meghibásodás vagy súlyos sérülés következhet be.
3. Javasoljuk, hogy az eredeti robogó dobozában található AC adaptert használja.
4. A használt elemeket a helyi törvényeknek megfelelően semmisítse meg. A használt elemek (vagy akkumulátorok) szakszerűtlen ártalmatlanítása hozzájárul a víz és a levegő szennyezéséhez. Védjük együtt a környezetünket.
5. Minden használat után töltsse fel az akkumulátort, hogy meghosszabbítsa a működési idejét.
6. Kérjük, töltsse fel az akkumulátort, és tárolja a robogót hűvös és száraz helyen, ha 30 napon belül nem használja. Az akkumulátort 60 naponta fel kell tölteni a hosszabb tárolás érdekében. A hosszú ideig tartó téltelenség rendkívül káros lehet az akkumulátorban, és olyan problémákat okozhat, amelyekre a garancia nem terjed ki.
7. Ne tárolja a robogó akkumulátorát 50°C feletti vagy -20°C alatti hőmérsékleten (pl.: meleg időben ne hagyja az autóban).

13. Nem garanciális előírások:

Az alábbi esetek egyikebe tartozik, hogy az ingyenes jótállás utáni szolgáltatás nem elérhető (még akkor sem, ha a készülék a jótállási időszakon belül van).

1. A jótállási idő lejárt.
2. Ütközés, hanyagság, visszaélés, baleset stb. által okozott meghibásodás vagy kár.
3. Meghibásodás vagy kár, amelyet az okoz, hogy a felhasználó nem az utasításoknak megfelelően üzemelteti a robogót.
4. Meghibásodás vagy kár, amelyet a felhasználók engedély nélkül szétszereltek vagy módosítottak az eszköz konfigurációjában.
5. Nem megfelelő karbantartás vagy tárolás által okozott meghibásodás vagy kár.
6. Egyéb rendellenes használat, például nem megfelelő áramforrásról történő töltés által okozott meghibásodás vagy kár.
7. Vis maior okozta meghibásodás vagy kár, például tűz, földrengés, hó és jég, villámcsapás, árvíz stb.
8. Értékesítés utáni szolgáltatás igénybevétele teljes körű készülékinformáció vagy szükséges bizonyíték nélkül.
9. A készüléket kereskedelmi célokra használják.

14. Biztonsági nyilatkozat:

1. Elektromos robogó - ez csak egy szórakoztató eszköz, nem egy jármű. Ha nyilvános helyen közlekedik, az elektromos robogó bizonyos kockázatokat rejt magában. Saját és mások biztonsága érdekében figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és szigorúan kövesse az utasításokat.
2. Meg kell értenie, hogy maradéktalanul be kell tartania az összes közlekedési szabályt és biztonsági ajánlást. Fennáll az ütközés veszélye a gyalogos vagy jármű közlekedési szabályainak megsértése miatt, valamint sérülésveszély a nem megfelelő működés miatt. Új típusú közlekedési eszközként az elektromos rollernek ésszerű sebességgel kell rendelkeznie, biztonságos távolságot kell tartania a gyalogosoktól és/vagy más járművektől, különösen nagy sebességgel, ismeretlen területen, csúszós úton stb.
3. Tartsa tiszteletben a gyalogosok jogait, amikor elektromos robogóval közlekedik. Ne ijesztgesse őket, különösen a gyerekeket, csökkentse a sebességét, és óvatosan vezessen körül. Próbálja meg előzni őket a bal oldalukon, ha ugyanabba az irányba halad (jobb oldali forgalmú országokban), és a jobb oldalukon, ha ellenkező irányba halad. Tartson biztonságos távolságot a gyalogosoktól.
4. Szigorúan tartsa be a helyi szabályokat, utasításokat és biztonsági ajánlásokat. E szabályok megsértése anyagi költségeket, személyi sérülést, közlekedési balesetet, jogi vitát, konfliktust vagy egyéb kellemetlenséget vonhat maga után. Cégünk nem vállal sem közvetlen, sem közvetett felelősséget a fent említett következményekért.
5. Ne adja kölcsön az elektromos robogót olyan személyeknek, akik nem ismerik a helyes használati elveket.
6. Gondosan ellenőrizze az elektromos rollert, mielőtt elindulna. Azonnal hagyja abba a robogó használatát, ha sérülést észlel az alkatrész(ek)en, az akkumulátor élettartama nyilvánvalóan lecsökkent, a gumibroncs lemerült vagy túlzott kopás jeleit mutatja, aktiváláskor nem jellemző hangokat vagy egyéb rendellenes tüneteket észlel.